


miglionico
DENTAL EQUIPMENT

NOUVELLES LIGNES PRENNENT FORME

*PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE
LIGNE D'UNITÉS DENTAIRES*

NT NG

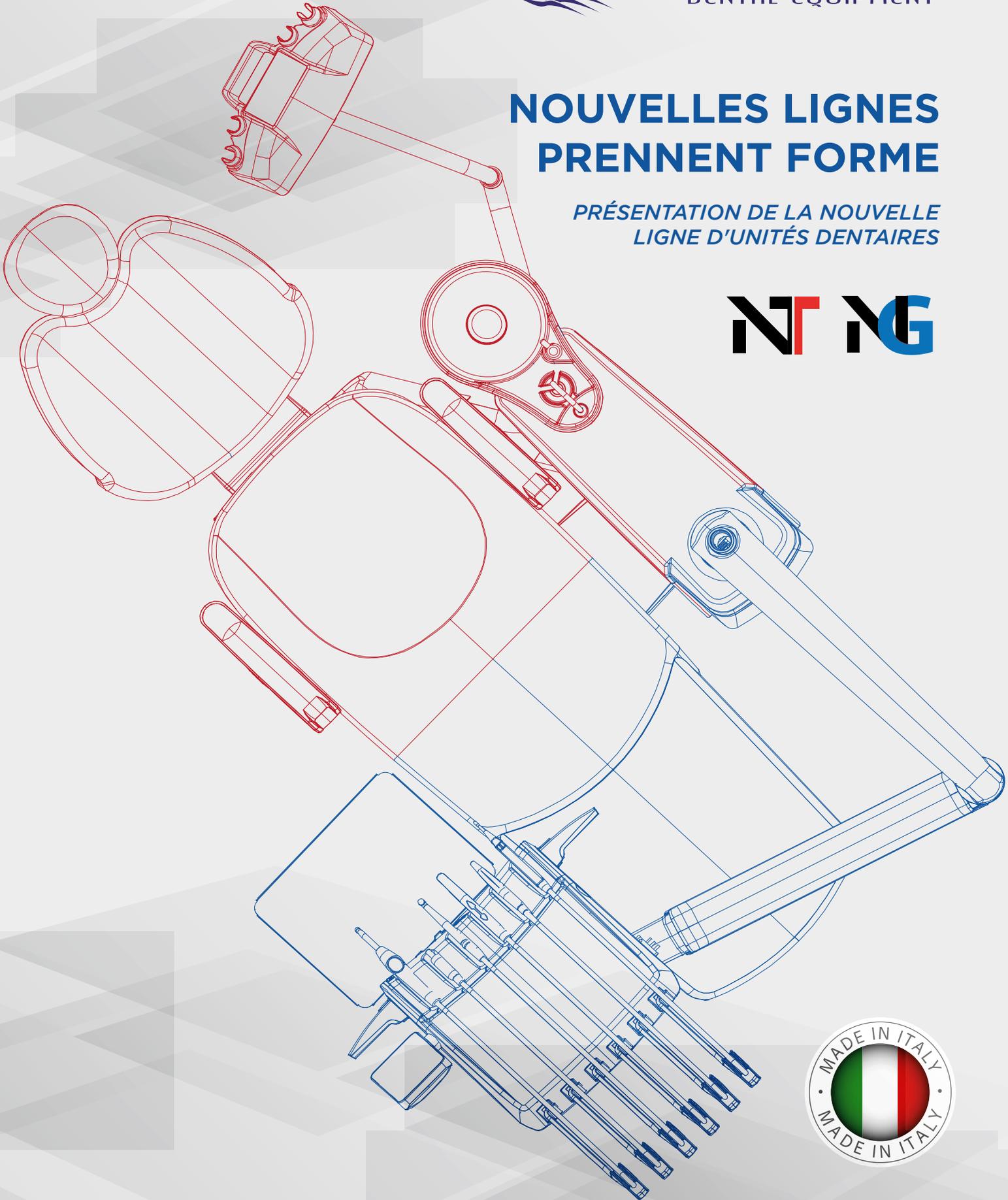



MOUVEMENTS DU FAUTEUIL

En plus d'être ergonomiquement plus confortable, notre fauteuil bouge de façon rapide et silencieuse.

Le dossier et l'assise se déplacent en synchronisation pour rendre le mouvement plus confortable et pour atteindre la position de Trendelenburg.

L'AFFICHAGE TOUCH

Grâce à l'affichage couleur avec surface en verre de 7", utiliser l'unité est encore plus simple.

La technologie touch permet de contrôler l'unité avec la plus grande facilité et intuitivité et de se débrouiller agilement entre toutes les fonctionnalités et paramètres disponibles.



La nouvelle ligne d'unités dentaires est basée sur une recherche longue et approfondie des besoins de l'utilisateur final, en cherchant en même temps de le satisfaire et d'anticiper les solutions. Notre nouveauté est l'utilisation de plastiques de nouvelle génération spécifiques

pour le secteur médical: un matériau plus maniable qui rend légère l'utilisation de l'unité. Grâce à cette caractéristique, nous avons pu réduire l'encombrement, en étudiant soigneusement chaque ligne pour créer des formes plus ergonomiques et plus confortables pour le dossier et l'assise.

Nos plastiques de nouvelle génération spécifiques pour le secteur médical sont :

- résistants aux agents chimiques et antibactériens ;
- résistants aux rayons UV (anti-jaunissement)

***ERGONOMIE
& DESIGN
INNOVANT***





TABLETTE OPÉRATEUR

La tablette opérateur change également sa forme et matériau.

De cette façon, la tablette est plus efficace et plus facile à nettoyer.

Le mouvement vertical du bras arrive à 600mm.

Une autre nouveauté est le système des fouets, qui est plus articulé et accompagne l'opérateur dans toutes les directions sans déplacer la tablette.

Les instruments retournent dans leur logement automatiquement avec un système d'alignement mécanique breveté.



GROUPE DES VANNES

Au dédain du groupe hydrique, il y a un compartiment aisé dédié au nouveau groupe des vannes, plus performant de la version précédente, pour réduire au minimum les opérations de maintenance.

TABLETTE ASSISTENTE

Des lignes plus définies pour la tablette assistante, articulée dans deux bras et faite de plastique de nouvelle génération, ce qui rend le mouvement plus léger.

4
5





GRUPE HYDRIQUE

Le groupe hydrique a été complètement renouvelé pour le rendre encore plus fonctionnel : il y a une subdivision des compartiments (partie hydrique, partie électrique et système d'aspiration et désinfection), chacun avec leur ouverture dédiée. L'intérieur du groupe hydrique est facile à

contrôler à la fois par les techniciens et les opérateurs, vu que l'espace a été étendu. Les tuyaux d'aspiration sont maintenant indépendants et chacun avec leur propre filtre.



PÉDALE

La pédale a été mise à jour et renouvelée selon les exigences du marché. Cet élément aussi a été créé avec des plastiques très résistantes aux sollicitations mécaniques et à l'usure.

Il y a une poignée de relevage escamotable, qui peut être mise en place avec le pied ou bien relevée quand on désire la déplacer.



6
7

DÉSINFECTION

Toutes les procédures pour la désinfection sont simples, rapides et efficaces.

Tous les éléments amovibles sont autoclavables.

SYSTÈMES DES CIRCUITS HYDRIQUES

Nos systèmes d'alimentation hydriques sont : eau du réseau, bouteille de 2 litres, MDS basique, MDS+ et MDS+17.



NT_P **NG_P**

Les unités NT et NG peuvent être réalisées également dans les versions avec tuyaux pendants, appelées **NT_P** et **NG_P**.

- 6 instruments sur la tablette opérateur ;
- le tapis est en silicone autoclavable et couvre l'entière tablette, avec la possibilité d'ajouter une tablette additionnelle pour avoir une surface de travail plus grande ;
- le bras a un mouvement vertical jusqu'à 600 mm;
- le clavier de l'opérateur est orientable ;
- les logements des pièces à main sont autoclavables.



Les images montrent la version NGpx



1.

NT_x **NG_x**

Les modèles NT et NG peuvent également être réalisés dans les variantes ambidextres, qui se reconnaissent à travers un suffixe à leur nom, c'est-à-dire

NT_x et **NG_x**

**VERSATILITÉ
&
CONFORTABILITÉ**



2.



3.



Ces variantes sont caractérisées par une structure indépendante composée de deux articulations et deux bras qui pivotent de 180°. De cette façon, l'unité peut être utilisée à la fois par les opérateurs droitiers et gauchers. Le mouvement est facile et la structure est légère.

Le fauteuil est plus confortable vu qu'il est fait en mémoire de forme. Le système hydrique, la pédale et tous les autres composants sont les mêmes des modèles NT et NG.



miglionico

DENTAL EQUIPMENT

Miglionico S.r.l.
Via Molise, Lotti 67/68 Z.I.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - ITALY
P. Iva: 05306940726
Tel +39 080 759552
Fax +39 080 2220970

www.miglionico.fr

